

VZDUCHOVÉ LYMFODRENÁŽNÍ LEGÍNY

MC0094

—

NÁVOD K POUŽITÍ



Obsah

ÚVOD.....	2
MOŽNOSTI POUŽITÍ.....	2
VAROVÁNÍ.....	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – NEPOUŽÍVEJTE KDYŽ:.....	3
JAK AIR LEGGY FUNGUJE?	3
OBSAH BALENÍ	4
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	4
OVLÁDÁNÍ.....	5
ÚDRŽBA.....	6

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš výrobek. Abyste mohl naplno využívat všech jeho vlastností a při používání neměl žádné komplikace, přečtěte si nejprve pečlivě tento Návod k použití. Návod nevyhazujte a uchovejte je pro pozdější použití.

Možnosti použití

1. Všeobecné tělesné formování.
2. Rozvoj atletických schopností.

Varování

Při použití elektrických zařízení se řiďte následujícími pokyny zabezpečujícími vaši bezpečnost, obzvláště v přítomnosti dětí:

1. Udržuje zařízení mimo dosah vody, elektrické části jsou aktivní i když je zařízení vypnuto.
2. Okamžitě po použití zařízení vypněte. Při kontaktu s vodou zařízení okamžitě vypněte a vytáhněte ze zásuvky, pokud je to možné.
3. Neumisťujte a neskladujte přístroj na místech přístupných vodě nebo jiné tekutině jako např. vana, dřez nebo záchod.
4. Pro snížení rizika poranění nikdy nenechávejte neobsluhovaný přístroj připojený do sítě a zapnutý.
5. V blízkosti dětí nebo invalidů může být AIR LEGGY použit pouze pod dohledem poučené osoby.
6. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem. Držte se instrukcí uvedených v tomto manuálu.
7. Udržujte AIR LEGGY mimo dosah dětí.

Bezpečnostní opatření – nepoužívejte když:

1. NEPOUŽÍVEJTE přístroj během sprchování.
2. NEPOUŽÍVEJTE při poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, po pádu zařízení z výšky, po pádu do vody.
3. NEPOUŽÍVEJTE přístroj když jste ospalí nebo ne úplně bdělí.

Tento přístroj není zdravotnické zařízení! Jeho účelem je masáž nohou. Použití tohoto přístroje nezaručuje žádné léčebné účinky. Před použitím doporučujeme poradit se nejdříve s vaším lékařem, pokud v současnosti podstupujete nějaký léčebný proces.

Jak AIR LEGGY funguje?

Kontrolní část pumpuje vzduch pro mírnou masáž nohou a chodidel. Při použití mějte ovládací panel vždy v ruce. Vždy začínejte s nejnižší úrovní masáže, poté nastavujte úroveň tak jak je vám to příjemné.


AIR LEGGY je napájen 4 ks AA baterií (nejsou přiloženy) – doporučujeme použít alkalické baterie pro dosažení lepší výsledků činnosti, nebo adaptér 230VAC 50Hz 45mA. Přístroj používejte pouze když je napájecí kabel připojen na správné napětí.

Obsah balení

- A. 2 masážní boty
- B. 2 stehenní masážní násady
- C. Dálkové ovládání
- D. 1 sada přepojovacích trubíc
- E. 6v AC/DC adaptér




Popis dálkového ovládání

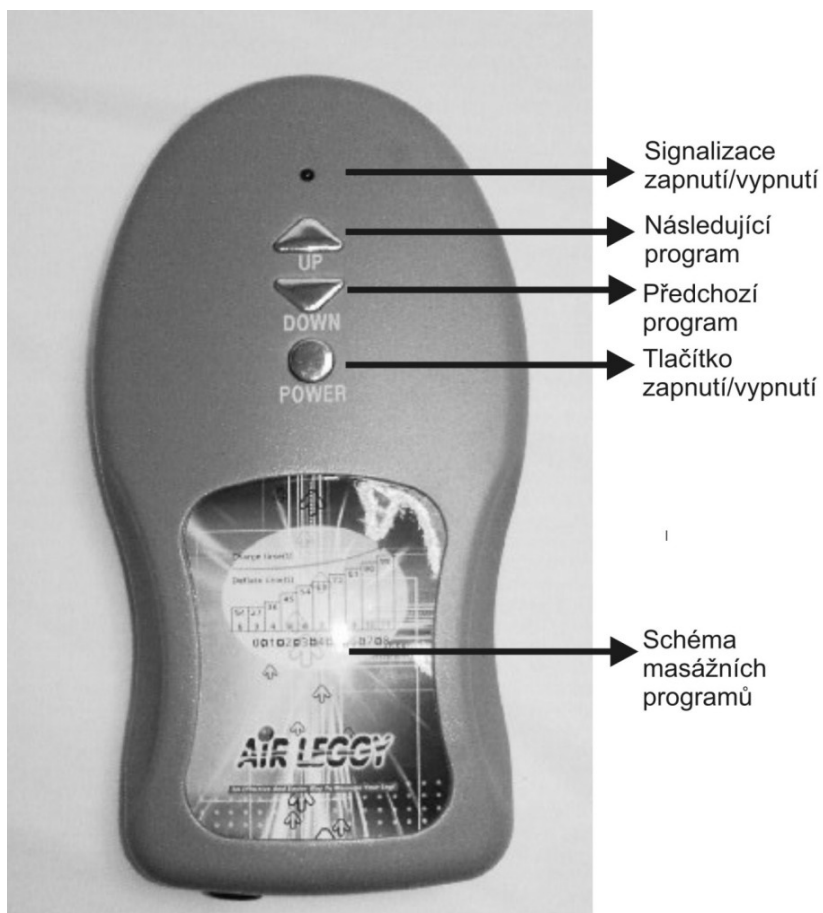

Ovládání

Použití AIR LEGGY je velmi snadné a intuitivní. Může být používán, když sedíte, nebo ležíte. Nastavený program automaticky nafukuje a sfukuje masážní boty, co masíruje vaše nohy a chodidla a pomáhá tak ulevit od stresu vyčerpanosti. Poskytuje komfortní, kompresní masáž. Zlehka uvolňuje napětí a zlepšuje krevní oběh v nohou a chodidlech.

1. Nasadte si MASÁŽNÍ BOTY (A) a ZPEVNŮJÍCÍ NÁSADY (B) na příslušná místa. Ujistěte se, že zip je úplně zatažen.
2. Připojte A, B a C PŘEPOJOVACÍMI TRUBICEMI. Ujistěte se, že jsou TRUBICE pevně uchyceny k A a B.
3. Připojte AC/DC adaptér k ovládacímu panelu. Poté ovládací panel připojte do zásuvky, ale před tím se ujistěte, že je vypnutý.
4. Když napájíte přístroj z baterií, ujistěte se, že jsou všechny jednoho typu (výrobce), tzn. nekombinujte alkalické a ne-alkalické baterie.
5. Stlačte "POWER" na dálkovém ovládacím panelu pro zapnutí přístroje, poté se rozsvítí LED indikátor. Opětovným stlačením se přístroj vypne.
6. Stlačením "UP" nebo "DOWN" regulujete čas masáže. Následující graf ukazuje jednotlivé režimy vzduchové masáže. **Charge time (S)** označuje dobu nafukování vzduchu, **Deflate time (S)** označuje následnou dobu vyfukování vzduchu. Pokud tedy například nastavíte masážní režim č. 5, pak bude nafukování vzduchu trvat 45 vteřin a doba vyfukování (uvolňování) bude trvat 6 vteřin. Tento cyklus se cyklicky opakuje.

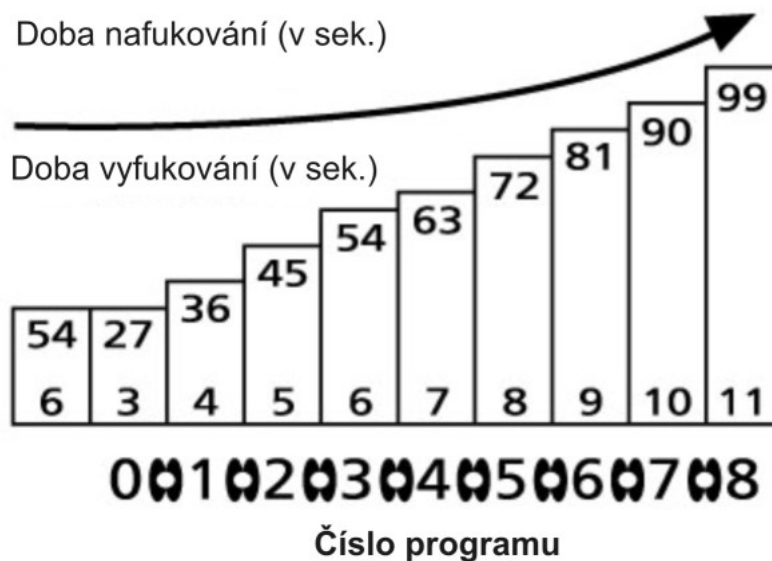

Je jen na uživateli jak dlouho nechá masáž působit. Pro ukončení masáže jednoduše stiskněte tlačítko „POWER“ na dálkovém ovládacím panelu.

7. MASÁŽNÍ BOTY (A) a ZPEVNŮJÍCÍ NÁSADY (B) mohou být použity dohromady nebo odděleně. Při společném použití připojte všechny TRUBICE k ovládacímu panelu. Při použití jednotlivých částí odpojte TRUBICE z příslušné části a upevněte část, kterou chcete používat.

Údržba

Přístroj AIR LEGGY je zakázáno prát v pračce. Pro čištění nepoužívejte chemické prostředky a nepoužívejte bělicí roztok. Jemně otřete AIR LEGGY vlhkou látkou a pozvolně odstraňte prach a nečistoty z jeho povrchu.

**Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem.
Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad.**



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

**Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.**

☎ 549 245 575; 602 766 759